

S-WAVE インプラントライブラリのインポート手順について


※最初に当センターホームページよりS-WAVEインプラントライブラリをダウンロードし、デスクトップなどに保存してから作業を開始してください。

1. 旧バージョンのライブラリをソフトウェアから削除 (1/3)




- デスクトップ上にある3Shape DentalSystem ControlPanelを開く。

2. 旧バージョンのライブラリをソフトウェアから削除 (2/3)

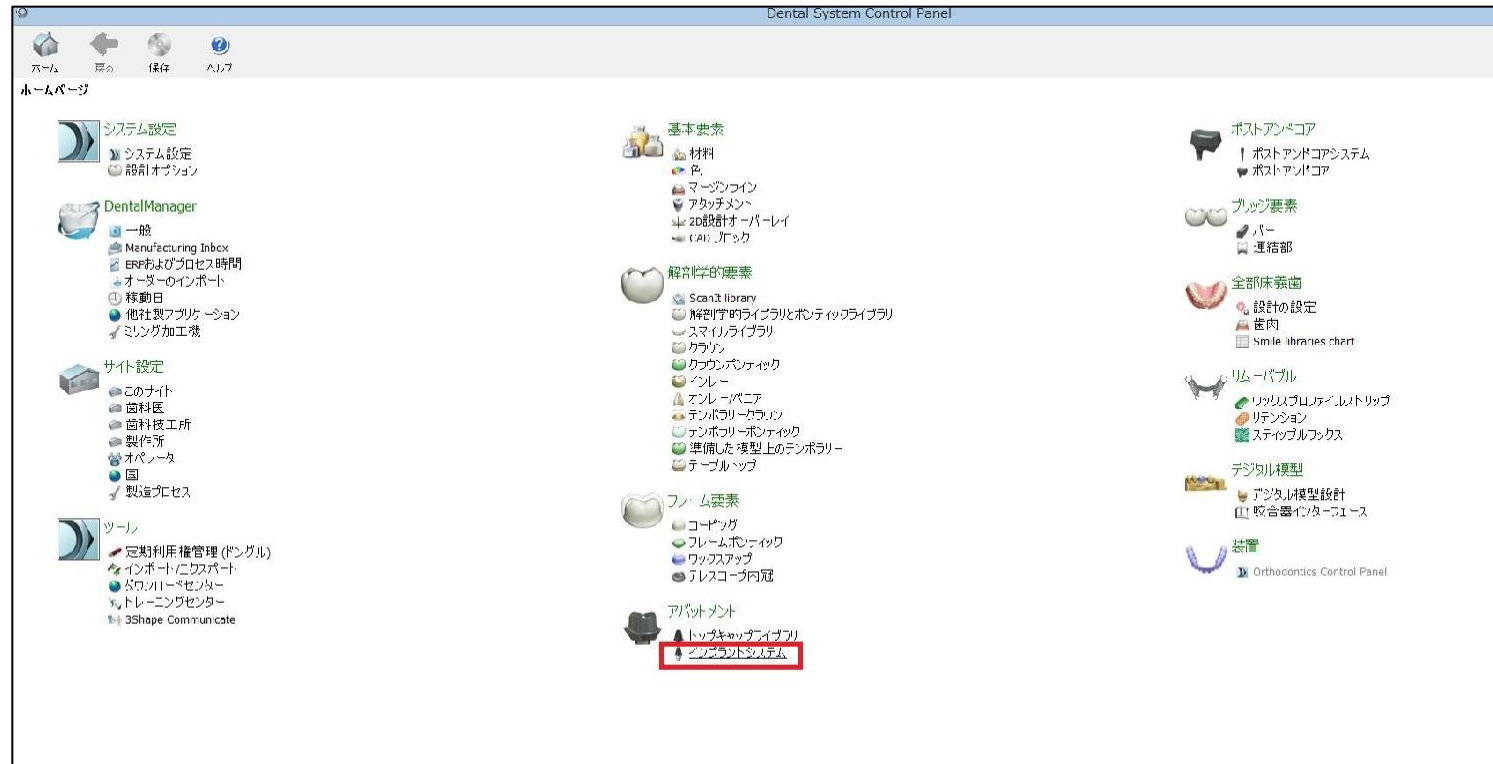

- インプラントシステムをクリックする。

3. 旧バージョンのライブラリをソフトウェアから削除 (3/3)

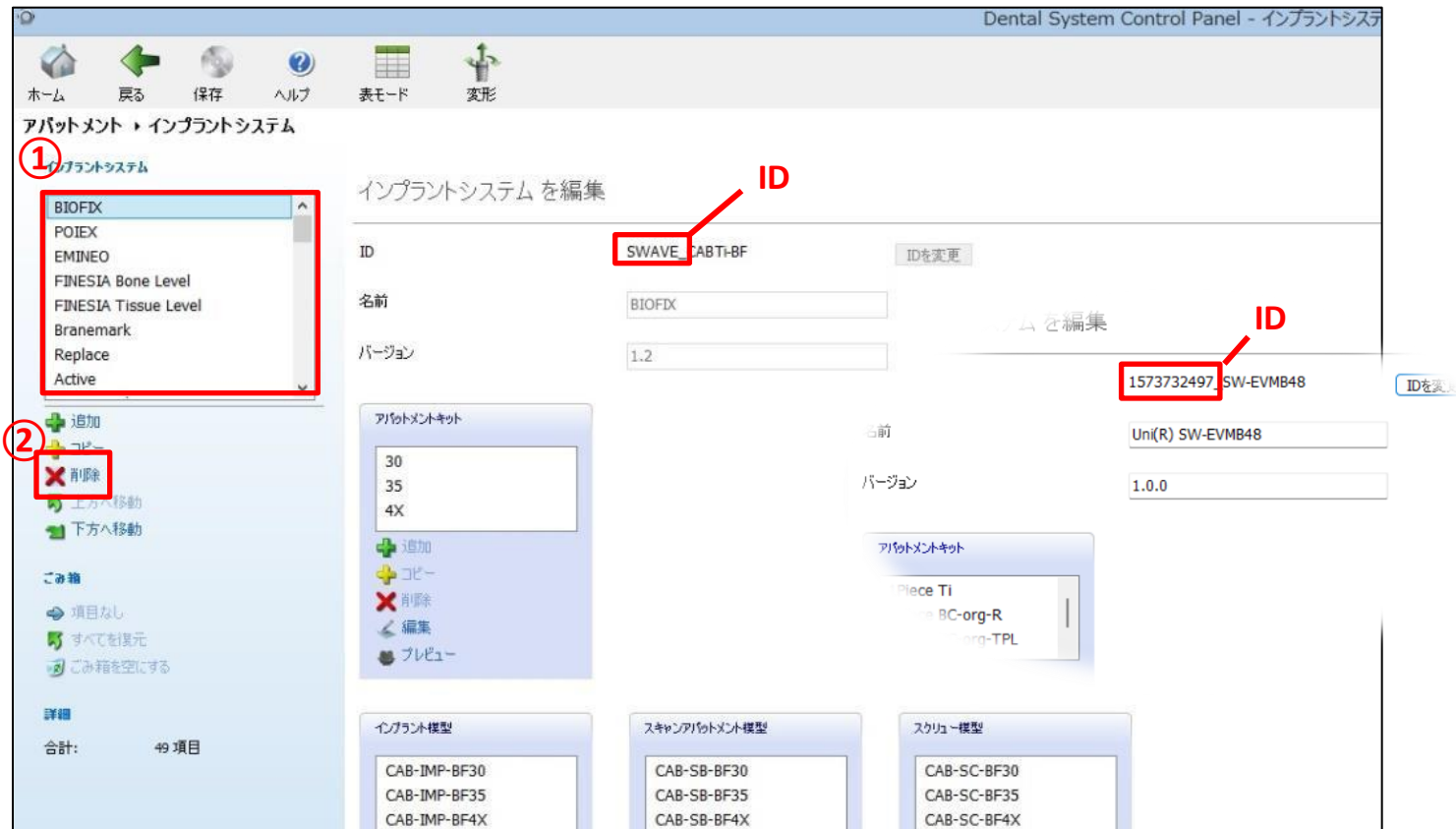

- ①のインプラントシステム一覧から、IDの先頭に「**SWAVE**」または「**1573732497**」と入力されているS-WAVEインプラントシステムを選択して、②の**削除**をクリックする。
- 上記作業を繰り返し、IDに「**SWAVE**」または「**1573732497**」と入力されているS-WAVEインプラントシステムを**全て削除**する。

4. 旧バージョンのライブラリデータをPCから削除

名前	更新日時	種類	サイズ
3Shape	2017/11/20 14:39	ファイル フォルダー	
Bicon	2016/09/20 13:24	ファイル フォルダー	
DWID	2016/04/20 9:55	ファイル フォルダー	
ImportedSystems	2016/12/09 13:36	ファイル フォルダー	
Straumann	2017/05/17 10:21	ファイル フォルダー	
S-WAVE_ImplantLibrary	2018/01/17 15:12	ファイル フォルダー	
Trial	2017/09/14 16:36	ファイル フォルダー	


該当のデータを選択し、**SHIFT+Delete**キーで削除する。
⇒SHIFTキーを押しながら削除することで、ごみ箱にデータが移動せずに完全にデータを削除することができる。



- 下記の実所に保存されている**S-WAVE_ImplantLibrary**を削除（**SHIFT+Delete**キー）する。


ローカルディスク（C:）⇒3Shape Configuration⇒DentalSystem⇒Dental System Control Panel
⇒library⇒3Shape⇒Abutments⇒ImplantSystems⇒S-WAVE_ImplantLibrary

5. S-WAVEインプラントライブラリのインポート (1/6)

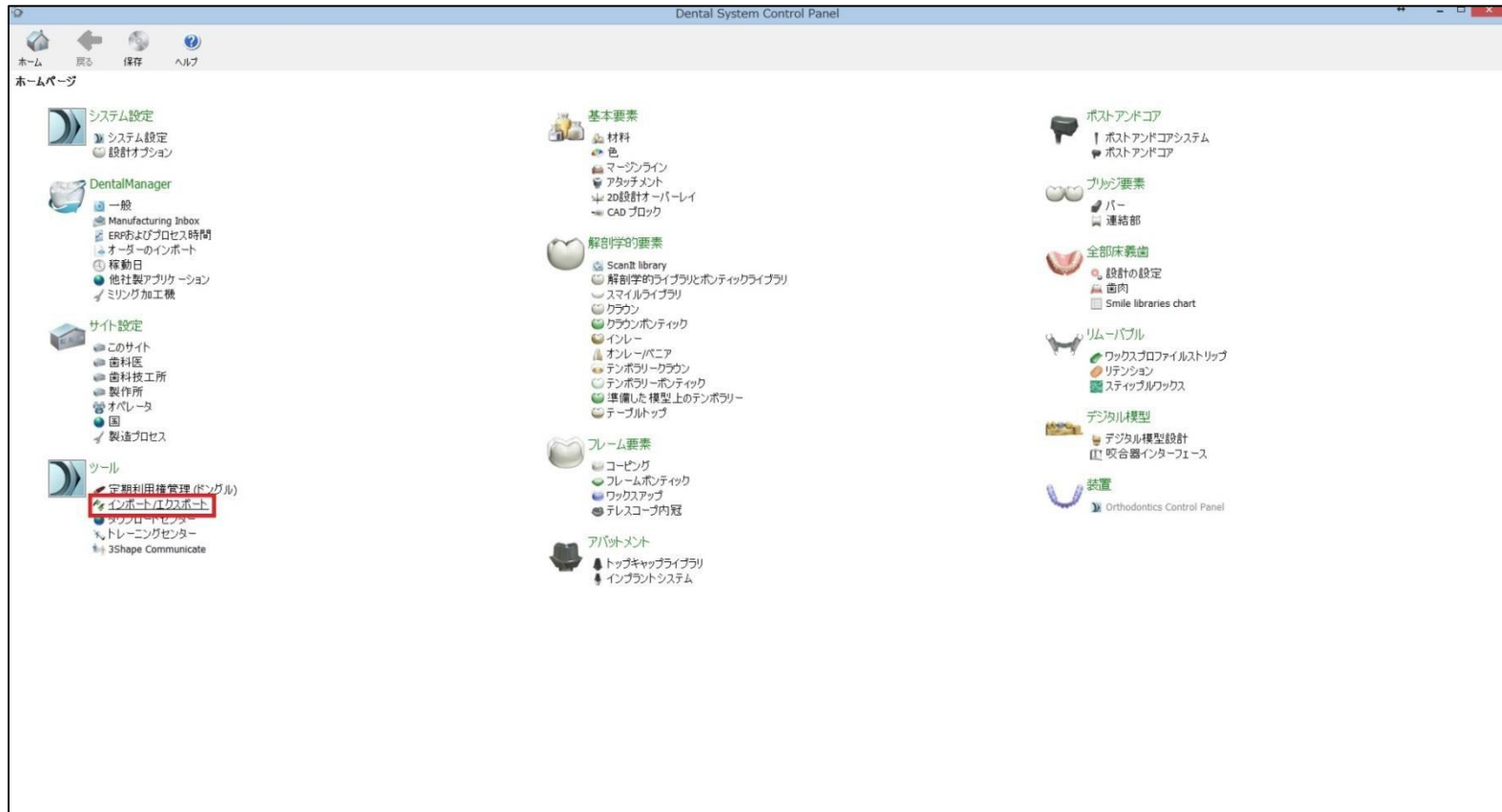


- 3Shape DentalSystem ControlPanelの インポート/エクスポート をクリックする。

6. S-WAVEインプラントライブラリのインポート (2/6)

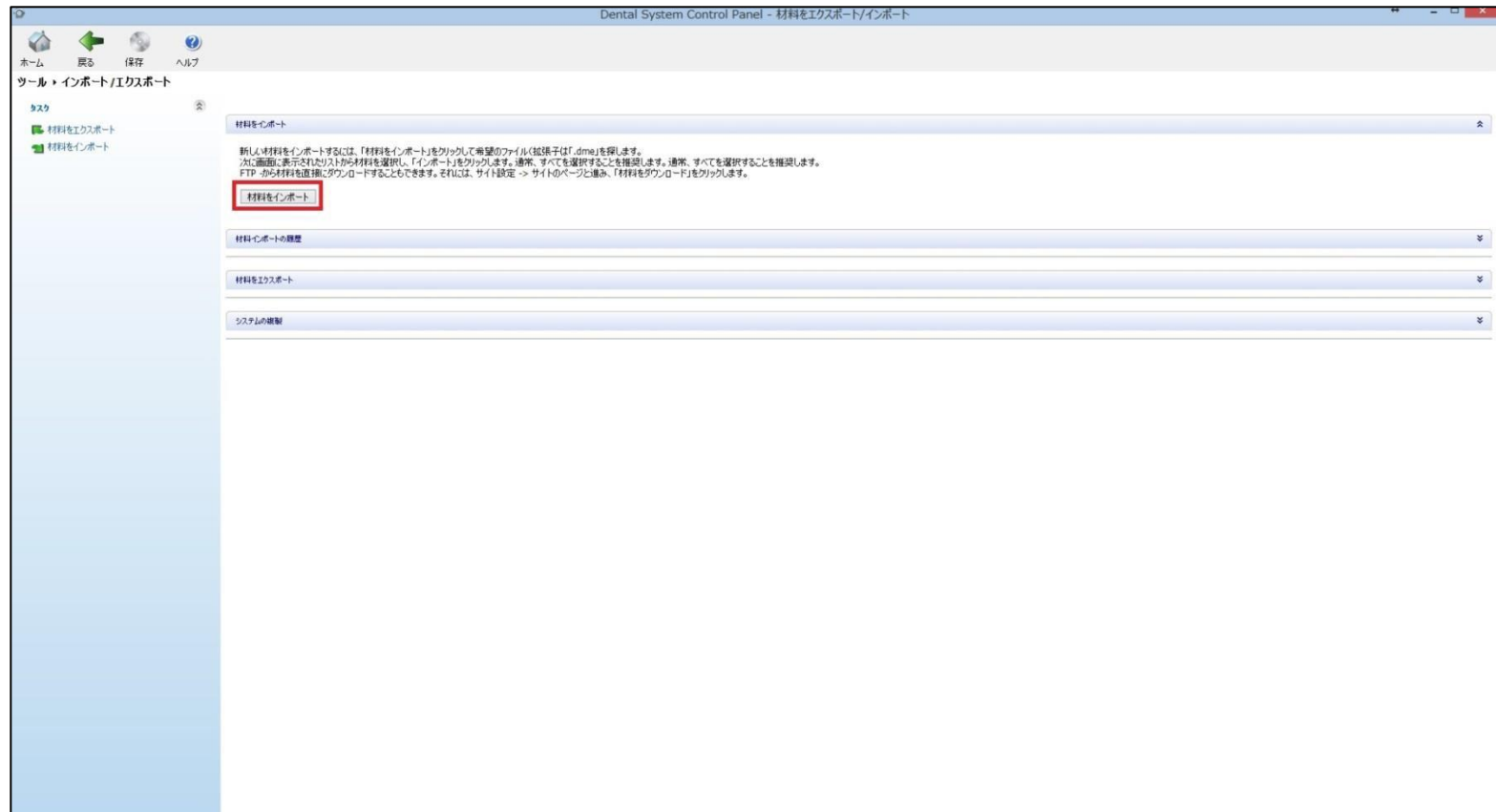


- 材料をインポートをクリックする。

7. S-WAVEインプラントライブラリのインポート (3/6)

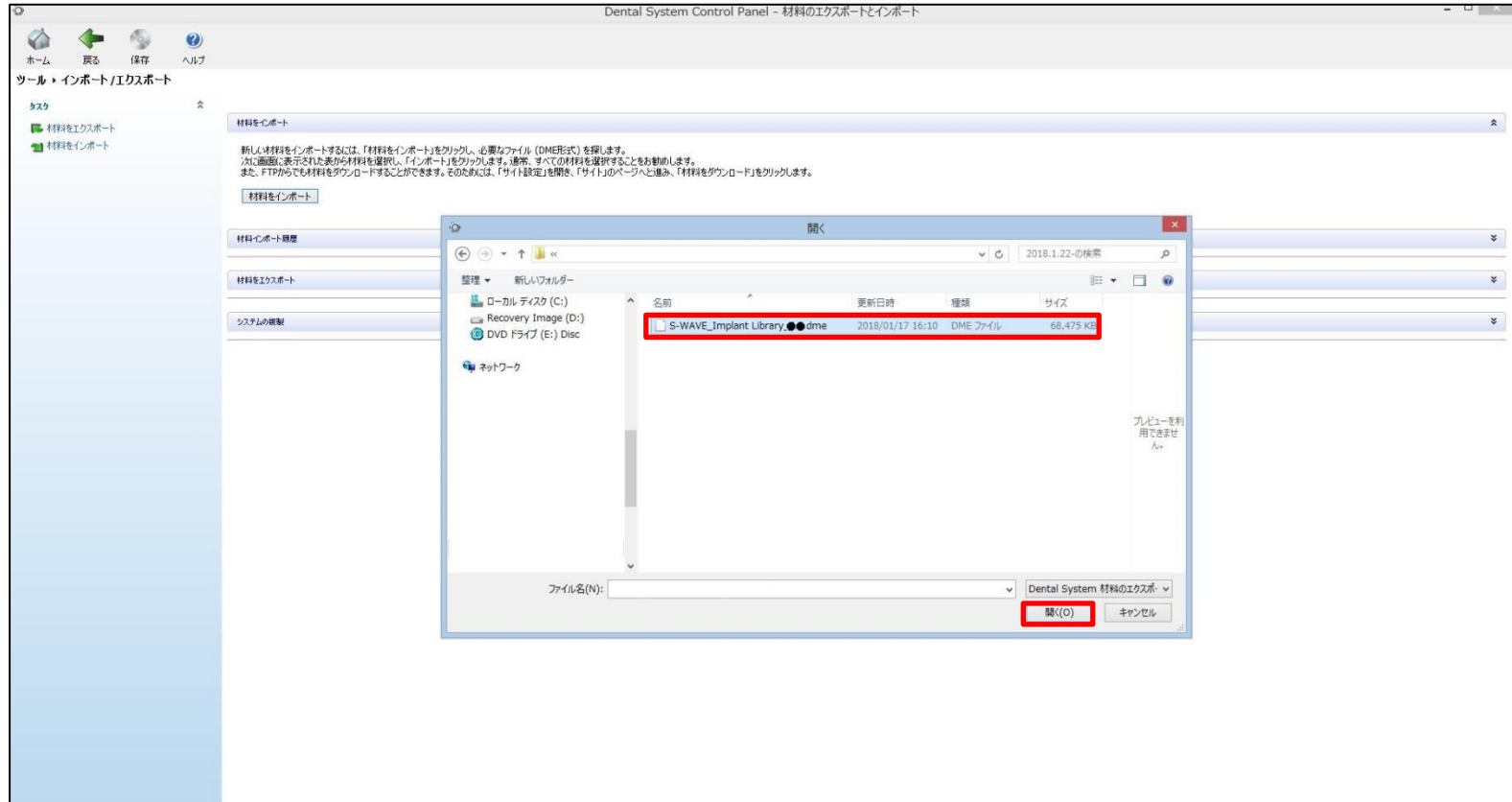


- ダウンロードした S-WAVEインプラントライブラリを選択して、開くをクリックする。

8. S-WAVEインプラントライブラリのインポート (4/6)

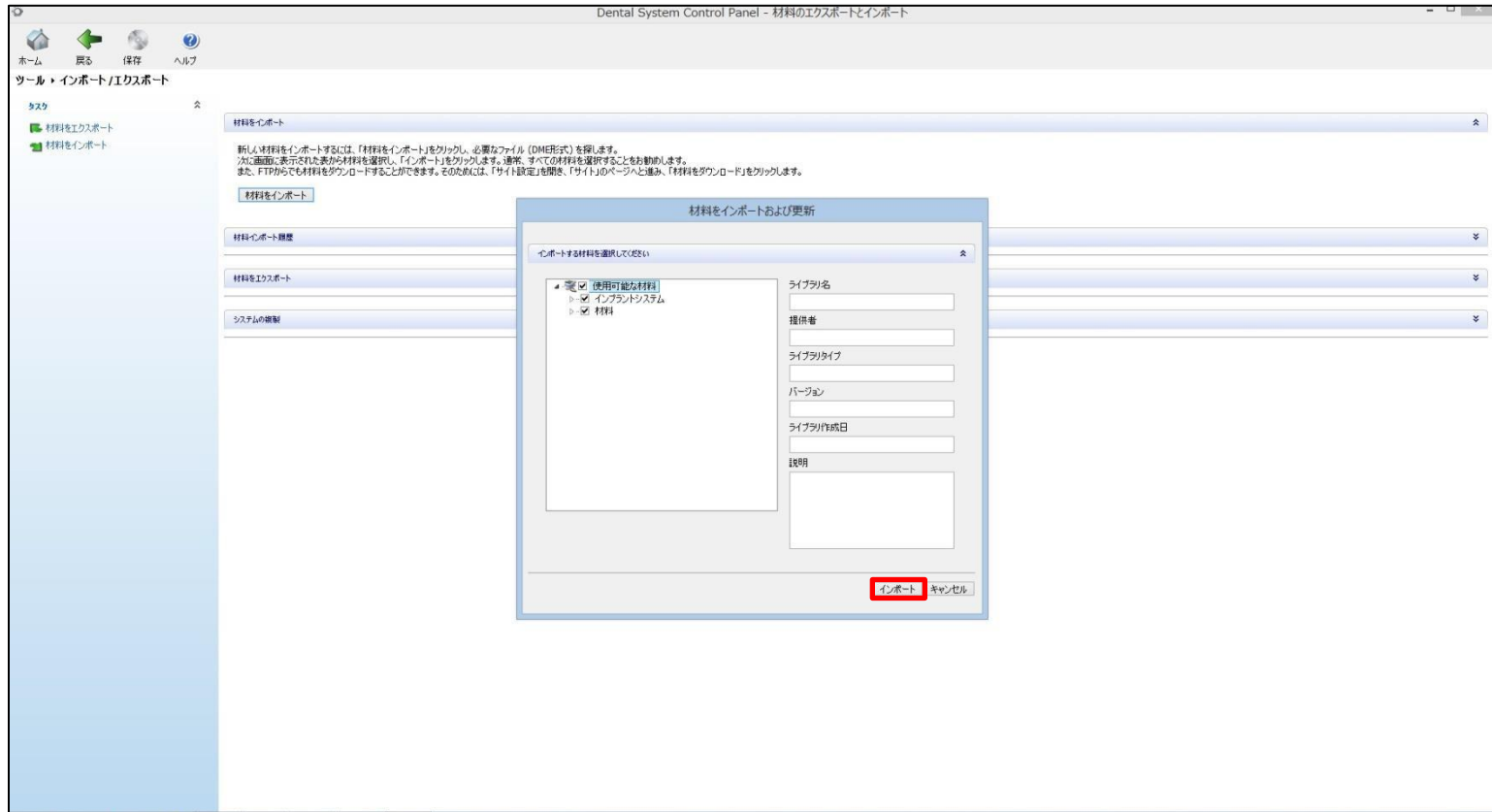


- インポートをクリックする。

9. S-WAVEインプラントライブラリのインポート (5/6)

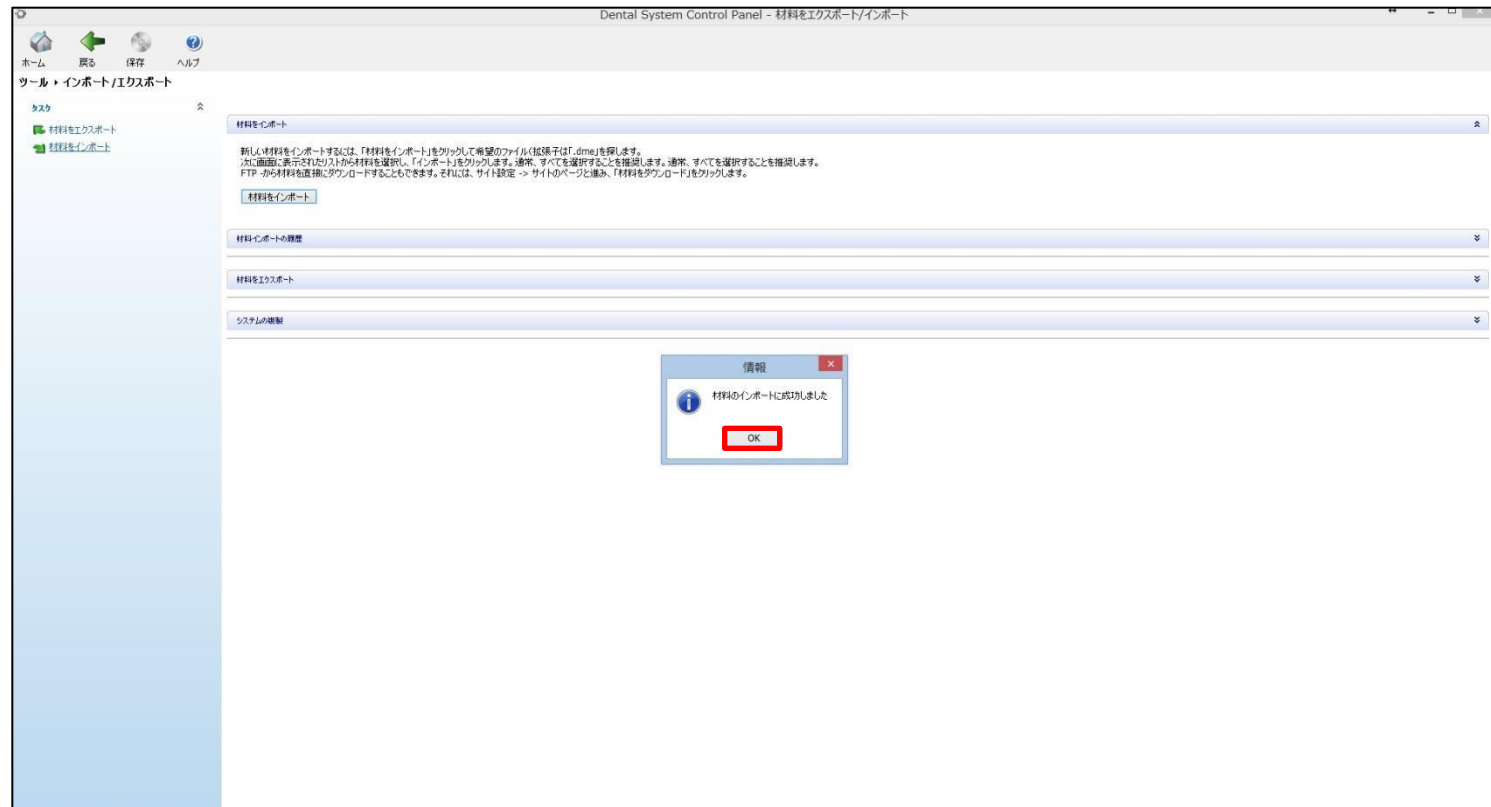

- **OK**をクリックする。

10.S-WAVEインプラントライブラリのインポート (6/6)

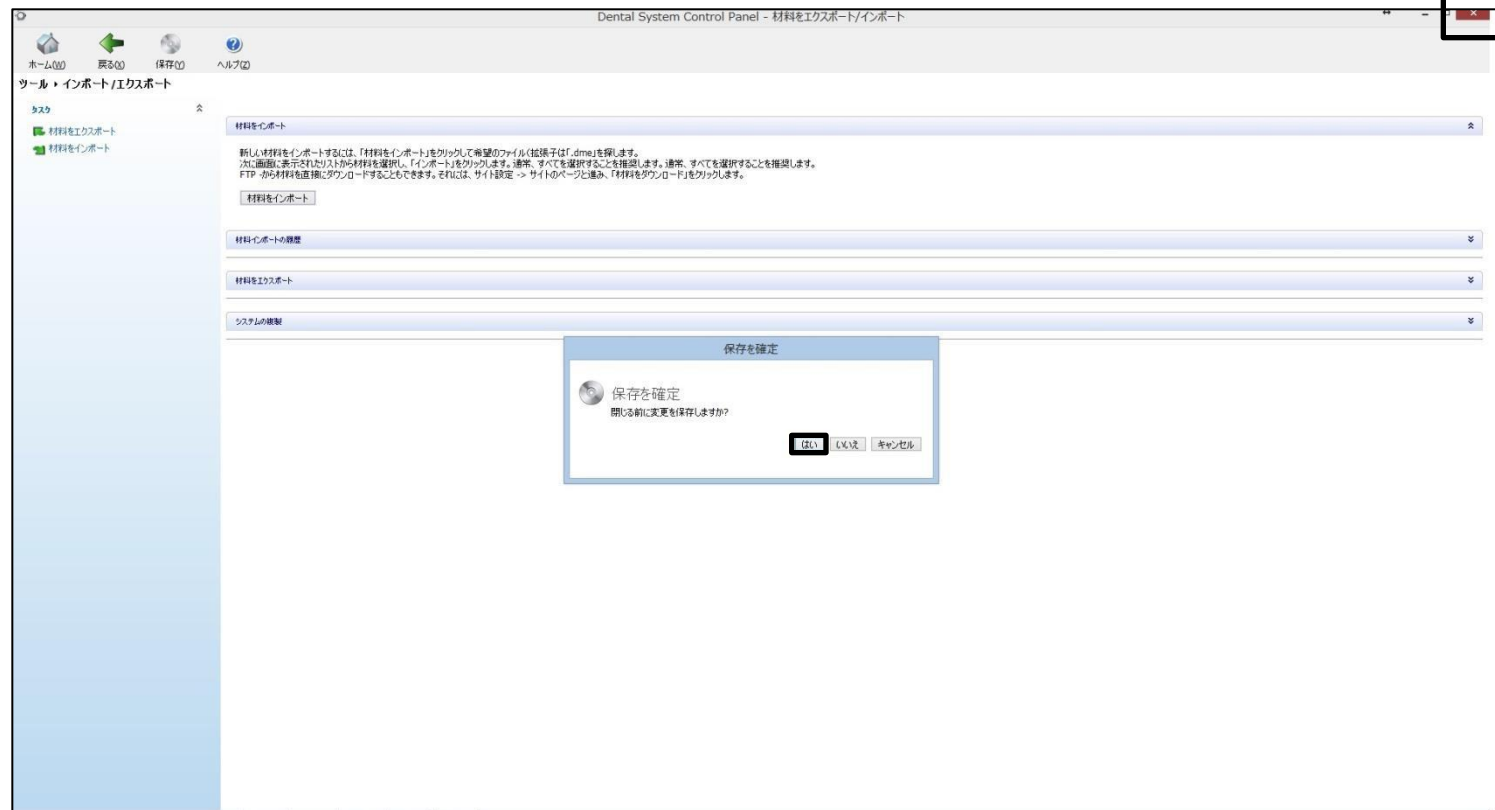

- 画面右上のxボタンをクリックし、保存を確認に**はい**をクリックして終了する。

以上